

Stanice BeneFusion MRI Bezpečná péče, volný průtok



Stanice BeneFusion MRI

Vysoce výkonná v extrémních podmínkách



1.5T/3.0T

Poskytuje infuzi
kompatibilní s MR pro MR
skenery 1,5 T i 3,0 T



Chrání infuzní pumpy
před magnetickým polem
skeneru MR



Izoluje elektromagnetické
rušení od infuzních přístrojů
pro zajištění vysoce kvalitního
snímání MR



Monitoruje hustotu
magnetického toku pro
zajištění bezpečnosti postupů
skenování MR



Bezdrátové dálkové
ovládání a monitorování

Chytré řešení MRI IT

Inovativní funkce bezdrátového dálkového ovládání

Umožňuje uživatelům dálkové ovládání infuzních pump během snímání MR bez přerušení provozu přístroje pro MR, tudíž přináší vylepšení efektivity a bezpečnosti pracovního postupu.

- Spuštění/zastavení infuze
- Změna rychlosti infuze
- Pozastavení/reset alarmů



Podniková technologie kódování zajišťuje zabezpečení zdravotnické sítě



Prvotřídní průmyslový design

Integrovaný IV stojan

Sloty pro vedení IV setu

Přední a zadní rukojeť

Odkládací stolek



Free combination of four channels



Ergonomické a uživatelsky přátelské detaily



Inovativní systém automatického brzdění na rukojeti zajistí bezpečné a bezproblémové přemísťování

- Obrazovka displeje ukazuje celkový objem, stav WiFi, informace o pacientovi a další údaje
- Velké a jasné sledovací okno během okamžiku káže uživateli přehled údajů o infuzi

- Brzda je integrovaná v rukojeti, takže kolečka se automaticky zabrzdí při uvolnění rukojeti
- Případně mohou být dle potřeby trvale odbržděna
- Přední i zadní rukojeť umožňuje flexibilitu při přepravě

Magsense™ a řízení alarmů

Umožňuje bezpečnou infuzi, která je kompatibilní s MRI


Magnetická pole emitovaná skenery MR mohou způsobit závažné poškození infuzních pump. Zajištění správného umístění infuzní stanice MRI je tudíž pro bezpečnou infuzi MRI zásadním faktorem.



Magsense™:

Přesné monitorování intenzity magnetického pole a systém alarmů

- Kontinuální monitorování síly magnetického pole v reálném čase
- Jasná indikace alarmů pomocí světelné a zvukové signalizace
- Integrovaná nabíjecí baterie pro nepřerušované používání více než 30 dní

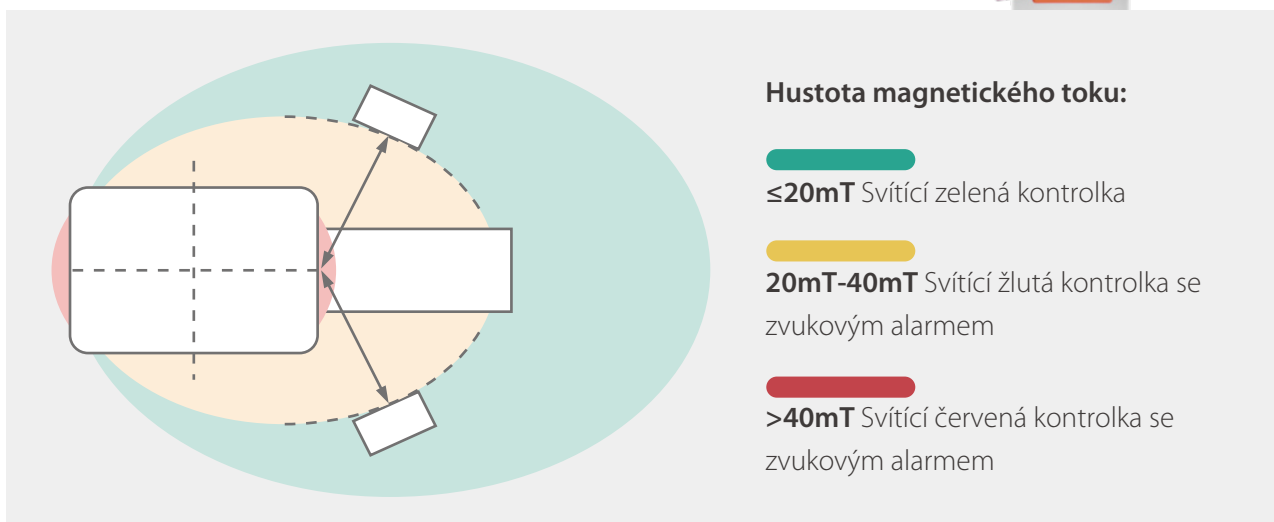

Vymazání alarmů během okamžiku

Zřetelně patrná indikace

- Dobře viditelná indikace alarmů díky 270° zornému úhlu
- Synchronizace alarmů mezi pumpou a stanicí umožňuje rychlou a přesnou lokalizaci urgentních stavů.









CHEIRÓN a.s.

Provozovna: Republikánská 45, 326 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 721 836 986, mobil: 702 267 797
PLZEŇ mobil: 702 186 493, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, OSTRAVA mobil: 601 395 447
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, BRNO mobil: 725 714 94

www.cheiron.eu

CH-06-01-230925_PTS_Mindray_BeneFusion_MRI_CZ

www.mindray.com

P/N:ENG-BeneFusion MRI Station-210285X6P-20230804
©2023 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. All rights reserved.

mindray
healthcare within reach